




RHINOSPIR PRO

Système pour Rhinométrie

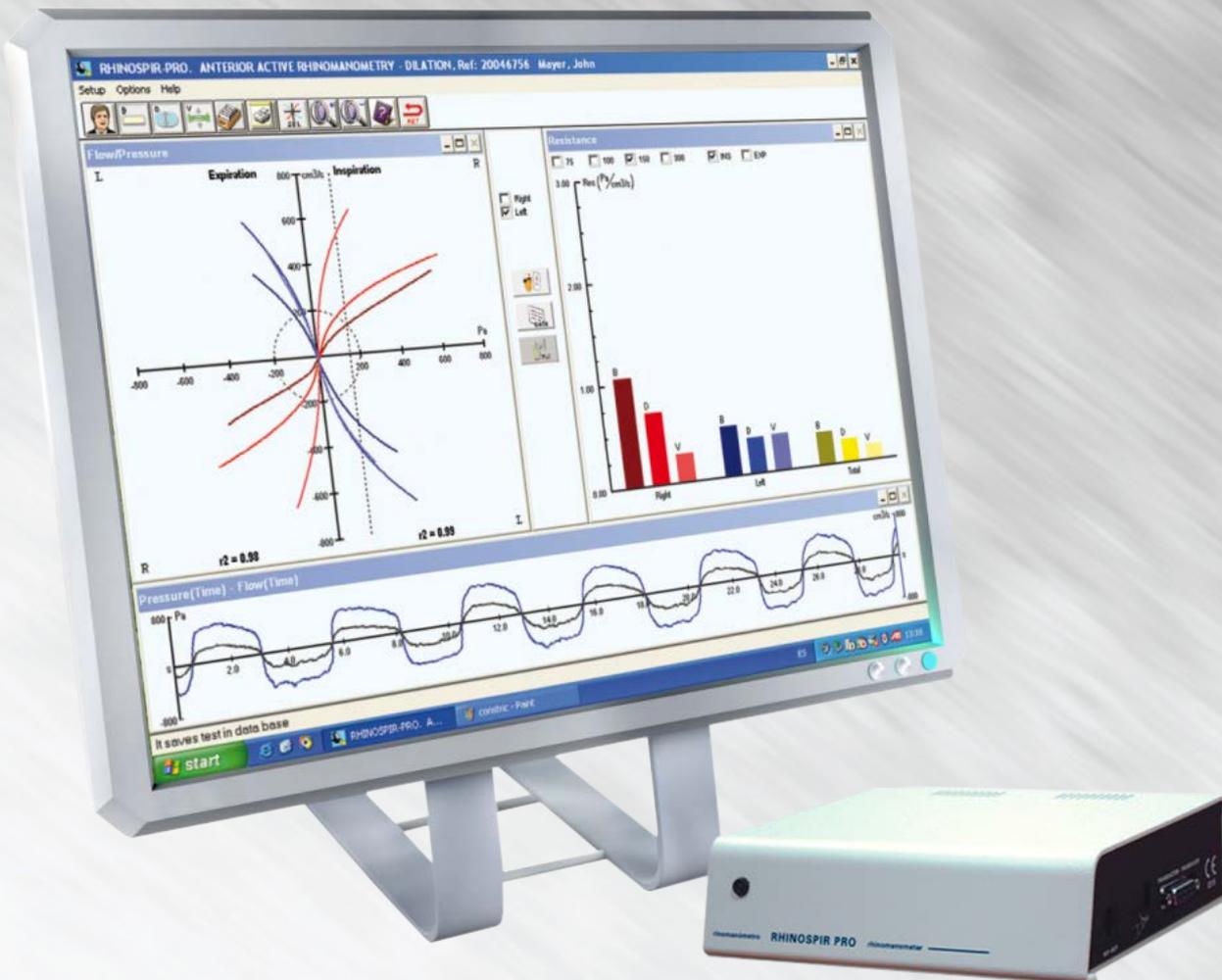

OPHTALMOLOGIE / ORL



RHINOSPIR PRO


.....Gng, a Y`dci f`F \]bca fhf]Y

Le rhinomanomètre RHINOSPIR-PRO est un appareil basé sur un PC qui permet d'effectuer la mesure objective des résistances des fosses nasales, en pouvant réaliser les tests suivants:

- Rhinomanométrie active antérieure.
- Rhinomanométrie active postérieure.
- Test de provocation nasale (T.P.N)
- En outre, il permet la réalisation de tests en modes basal, dilatation et/ou vasoconstriction.

Le RHINOSPIR-PRO comporte un software qui fonctionne sous Windows et offre les principales options suivantes:

- Interface intuitive.
- Visualisation des graphiques de Flux/Pression, Flux/Temps, Pression/Temps et Résistances Fosses durant les tests de rhinomanométrie.
- Rapport configurable.
- Diagnostic.
- Gestion des différentes bases de données de patients et de tests.
- Calibration facile.

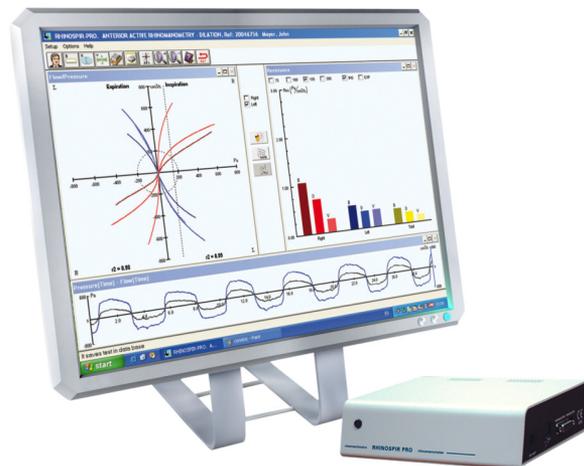

Principales caractéristiques

- Échelle de mesure: Flux (ml/s) 0 à ± 1200 .
- Résistance dynamique au flux Pa/ml/s < 0,001.
- Exactitude dans les mesures: Flux (ml/s) (le plus élevé) 3% ou 30.
- Pression (Pa) (la plus élevée) 35 ou 30.
- Fréquence d'échantillonnage: 50 Hz.

Accessoires standard

- Transducteur
- Masque adultes (compris les tuyaux de connexion à l'unité des transducteurs)
- Sondes nasales
- Calibrateur
- Embouts en carton jetables pour le calibrateur

Accessoires optionnels

- Masque pédiatrique (compris les tuyaux de connexion à l'unité des transducteurs)
- Jeu de tampons nasaux obturateurs pour adultes (tampon obturateur de pression et tampon obturateur de flux)
- Jeu de tampons nasaux obturateurs pédiatriques (tampon obturateur de pression et tampon obturateur de flux)
- Module spirométrie (Fleisch, turbine ou jetable)
- Module pulsoxymétrie
- Module Pressions Maximales
- Module Station météorologique




ADULT MASK



PEDIATRIC MASK



NOSTRIL CONE SET

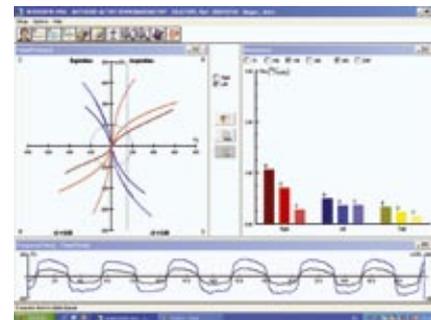

Rhinomanométrie



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

