



# ES-DTR Série

POITRINE BUCKY



IMAGERIE



# ES-DTR Série

<b>Nom commercial</b>	ES-DTR - Poitrine Bucky	
<b>RÉF</b>	ES-DTRXXX	
<b>Classe</b>	Le dispositif médical est de classe I	
<b>Gamme de produits</b>	<b>CODE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
	<b>ES-DTR600BVS</b>	Support de coffre conçu pour fixation murale, panneau en ABS avec filtration 0,5 mm Al.Eq.. Complet de Potter Bucky pour cassette radiographique de taille jusqu'à 430x430 mm, réglé pour AEC. Grille anti-diffusion oscillante taille 480x438mm R10:1 F150 103lp/pouce non incluse. Accessoires pour le positionnement du patient disponibles au choix.
	<b>ES-DTR604BVS</b>	Support de coffre conçu pour la fixation murale, panneau en ABS avec filtration 0,5 mm Al.Eq.. Complet de support de détecteur numérique pour cassette de dimensions jusqu'à 430x430x17 mm (17"x17"x0,6") avec support pour grille anti-diffusion amovible de dimensions 480x438 mm, prévu pour AEC. Grille non incluse. Accessoires pour le positionnement du patient disponibles au choix.
	<b>ES-DTR604500BVS</b>	Support de coffre conçu pour fixation murale ou pour fixation avec base autoportante incluse, panneau en ABS avec filtration 0,5 mm Al.Eq.. Support de détecteur numérique complet pour cassette de taille jusqu'à 430x430x17mm (17"x17"x0,6") avec support pour grille anti-diffusion amovible de taille 480x438mm, prévu pour AEC. Grille non incluse. Accessoires pour le positionnement du patient disponibles au choix.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ES-DTR600BVS

Caractéristiques et dimensions:


- Panneau avant : ABS
- Filtration : 0,5 Al eq.
- Fixation du support : au mur
- Mouvement vertical Potter-Bucky : 1565 mm
- Distance minimale du sol de la zone d'imagerie : 385 mm
- Distance maximale du sol de la zone d'imagerie : 1950 mm
- Équilibre du mouvement vertical : Contrepoids
- Frein de mouvement vertical : mécanique
- Alimentation : 24 Vcc 11 VA
- Grille Potter-Bucky standard : R 10 103 lignes par pouce :SID 150 cm
- Poids de l'appareil: 105 kg

### ES-DTR604BVS/ES-DTR604500BVS

Caractéristiques et dimensions:


- Panneau avant : ABS
- Filtration : 0,5 Al eq.
- Fixation du support : au mur
- Mouvement vertical du détecteur : 1565 mm
- Distance minimale du sol de la zone d'imagerie : 385 MM
- Distance maximale du sol de la zone d'imagerie : 1950 mm
- Équilibre du mouvement vertical : Contrepoids
- Frein de mouvement vertical : mécanique
- Poids de l'appareil : 90 kg

# ES-DTR Série

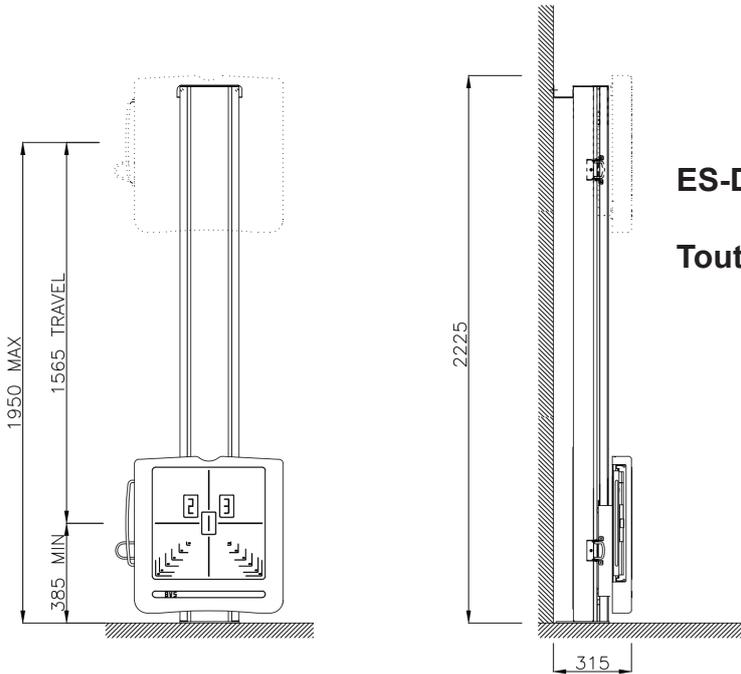



## ES-DTR600BVS

Toutes les mesures suivantes sont en mm :

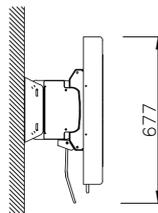




## ES-DTR604BVS/ES-DTR604500BVS

Toutes les mesures suivantes sont en mm :

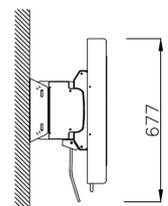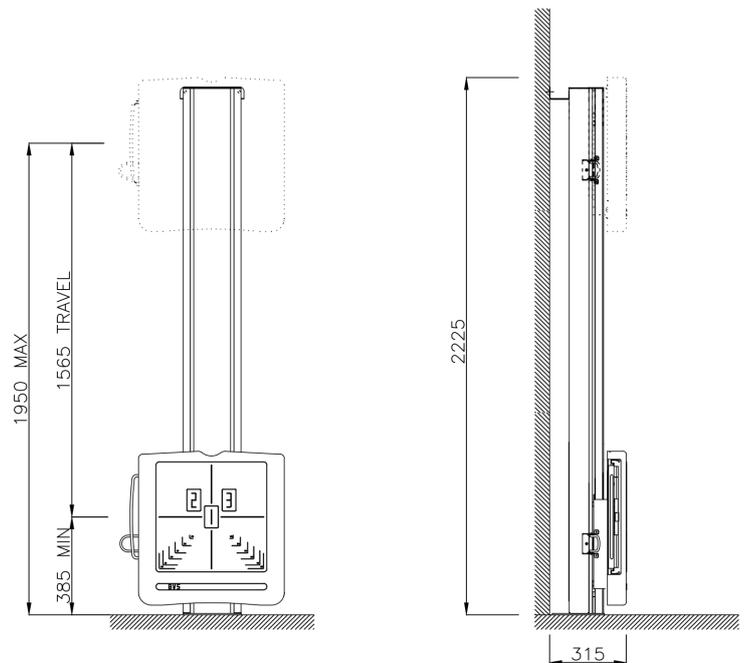


## Accessoires

- cod. AS045 – Base autoportante
- cod. AS030 – Support de bras
- cod. AS020 – Poignées latérales
- cod. CL0001 - Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec préamplificateur et câbles d'extension de 20 m pour générateur avec connecteur WECO.
- cod. CL0002 - Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec câbles d'extension de 20 m pour générateur avec connecteur WECO (sans préamplificateur).
- cod. CL0003 - Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec préamplificateur et câbles d'extension de 15 m pour générateur avec connecteur LEMO.
- cod. CL0004 - Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec câbles d'extension de 15 m pour générateur avec connecteur LEMO (sans préamplificateur).
- cod. M0046 – Grille 215L” R:10 SID150cm 480x438mm.

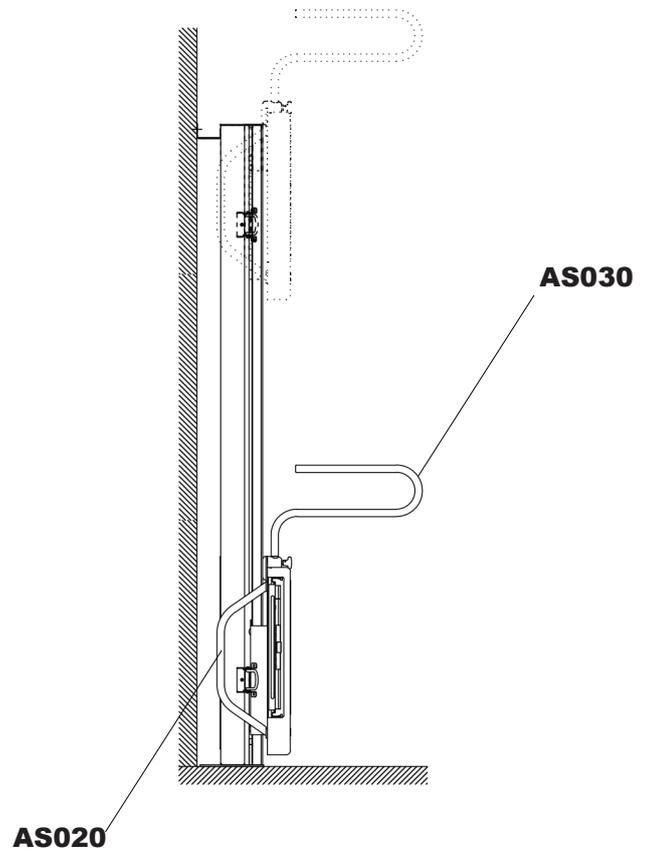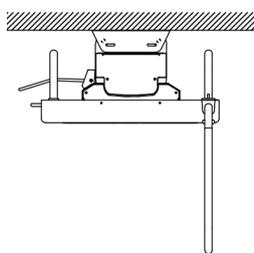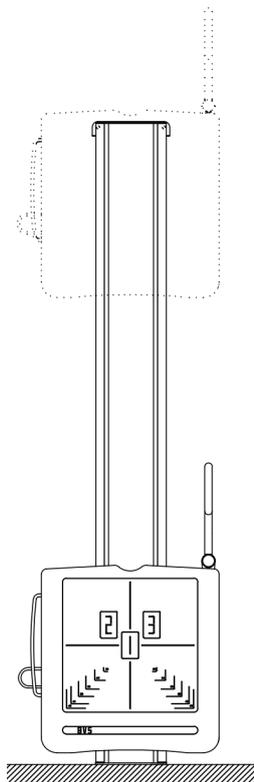

AS020

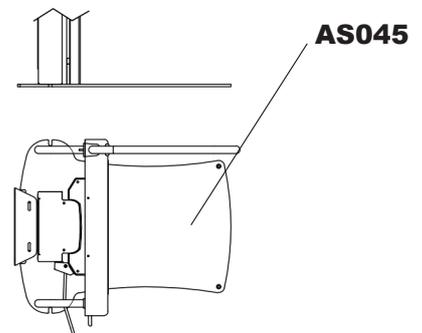

AS045