




REFRIGERATEUR MEDICAL-PHARMACEUTIQUE

MPR 1160 W xPRO (Version en blanc)

MPR 1160 S xPRO (Version en acier inox)

- **Structure:** modèle vertical, réalisé en tôle d'acier plastifiée antibactérienne de couleur blanc pas toxique ou, en alternative, en acier inox 18/10 AISI 304 à l'intérieur bien que à l'extérieur. Les angles de la chambre de stockage sont arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage et le fond a la forme d'une vasque pour contenir les éventuels liquides
- **Isolation:** obtenue avec du polyuréthane expansé à haute densité (40 Kg/m³) avec une épaisseur de 75 mm. Sans CFC et HCFC
- **Pieds:** N. 4 réalisés en acier inox 18/10 AISI 304, facilement réglables en hauteur sans outils
- **Porte vitrée:** N. 2 à charnières, rangées flan à flan, réalisées avec un encadrement d'aluminium anodisé, triple-vitrage trempé thermo-isolant et interstices sous vide pour augmenter le coefficient d'isolation. Les portes sont dotées d'un joint magnétique sur les 4 faces qui garantit une fermeture parfaitement hermétique et il est monté à encastrement pour une substitution facile. Les poignées toute-hauteur ergonomiques, intégrées dans le profil de la porte, sont réalisées en aluminium. Les portes sont dotées d'un dispositif de fermeture à rappel automatique pour ouvertures inférieures à 90°. Interrupteurs à levier bloquent la ventilation interne (pour limiter la dispersion d'air froid pendant l'ouverture)
- **Équipement intérieur:** N. 6 clayettes (3 pour chaque porte) réalisées en fil d'acier plastifié et pas toxique supportées par glissières anti-renversement en acier INOX 18/10 AISI 304 réglables en hauteur. L'équipement intérieur permet une grande flexibilité en ce qui concerne sa composition, avec la possibilité de combiner étagères et tiroirs (tiroirs sur demande)
 - Dimensions des clayettes (L x P cm): 53 x 55
 - Portée des clayettes (Kg) : 35 (uniformément distribués)
- **Éclairage intérieur:** N. 2 tubes à LED, placés dans les flancs de la chambre de stockage avec activation automatique grâce à un poussoir qui se trouve sur le panneau de contrôle. Ils garantissent une économie d'énergie et ils préviennent le chauffage intérieur produit par les tubes au néon traditionnels
- **Panneau de contrôle xPRO:** placé dans la partie supérieure de la structure, il fonctionne au moyen d'un microprocesseur avec poussoirs capacitifs et écran à couleurs. Il surveille toutes les fonctions de l'appareil grâce à l'interface EEN (EVERmed Easy Navigation) nouvelle et intuitive avec icônes et messages clairs qui permettent une interactivité aisée entre l'appareil et l'utilisateur pour une programmation simple de toutes les fonctions de l'appareil selon les besoins et le contrôle le l'état de fonctionnement. Les fonctions principales du panneau sont :
 - Affichage TFT à couleurs de 3,5", à haute résolution et retro éclairé à LED qui permet la visualisation de l'état de fonctionnement de l'appareil (température réelle, travail du compresseur, dégivrage, alarmes, etc.) et la navigation dans les différents menus de contrôle soit pour programmation que pour contrôle
 - Réglage et affichage digital de la température avec une précision de 0,1°C
 - Clavier à verrouillage de protection automatique pour éviter toute altération des personnes pas autorisées
 - Access à double niveau de sécurité, pour menu et touche ON/OFF, avec codes individuels, personnalisables et reprogrammables
 - Batterie de secours, à recharge automatique, qui garantit l'autonomie de fonctionnement du panneau de contrôle, en cas de défaut d'alimentation, jusqu'à 48 heures. L'état de charge est toujours affiché sur l'écran pour vérification immédiate
 - Alarme acoustique et visuelle (à réarmement automatique) pour :
 - haute et basse température avec limites programmables par l'utilisateur grâce à un menu dédié

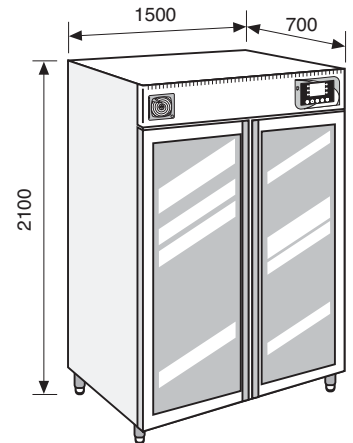




REFRIGERATEUR MEDICAL-PHARMACEUTIQUE

- porte ouverte, avec un délai d'activation de 2 minutes pour permettre les opérations standard. Le délai est programmable grâce à un menu dédié
- coupure de courant
- batterie faible
- condenseur colmaté
- évaporateur anti – givre
- défaut du capteur
- Désactivation de l'alarme acoustique en maintenant la signalisation visuelle jusqu'à l'interruption de l'anomalie avec réactivation automatique si la condition d'alarme persiste. Le retard de réactivation est programmable grâce à un menu dédié
- Poussoir de test d'alarme pour vérifier le fonctionnement du panneau de contrôle, le niveau de charge de la batterie et les seuils de température qui activent l'alarme
- Mémoire des 30 dernières conditions d'alarmes signalées (pas modifiable), avec la possibilité de vérifier sur l'écran le type d'alarme et toutes les renseignements relatifs (horaire de début et de fin, piques de température atteinte où applicable)
- Historique ouvertures porte des 30 jours derniers (pas modifiable), avec la possibilité de afficher la quantité des ouvertures porte, alarmes déclenchés et temps total de porte ouverte jour par jour
- Historique dégivrages des 30 jours derniers (pas modifiable), avec la possibilité de vérifier le type de dégivrage, le début et la durée
- Possibilité de programmer la ventilation interne, pour optimiser la circulation de l'air en relation aux conditions et aux besoins d'utilisation
- Graphique de température en temps réel, avec la possibilité de naviguer dans les 52 heures de travail précédentes et de zoomer l'affichage pour un contrôle précis du période d'intérêt
- Indications écrites en 3 langues (Italien, Anglais, Français)
- Sonde Pt 1000 pour une meilleure précision du contrôle de la température
- Contact sec NO pour le renvoi du signal d'alarme
- Possibilité de mettre à jour le logiciel
- **Groupe frigorifique:** placé dans la partie supérieure de la structure, avec une unité de condensation composée par 1 compresseur hermétique et 1 condensateur à ailettes de type ventilé. Dans le plafond de la chambre de stockage il y a le paquet de l'évaporateur à ailettes, avec canalisation en cuivre et, à protection du même, une couverture en acier INOX qui incorpore le ventilateur. Tous les composants montés sont de typologie industrielle pour garantir le maximum de la fiabilité
- **Gaz réfrigérant:** R452A sans CFC
- **Typologie de réfrigération:** ventilation forcée, grâce à un ventilateur, pour garantir l'uniformité et la stabilité de la température à l'intérieur de la chambre de stockage
- **Dégivrage:** totalement automatique, avec la possibilité de faire interventions préprogrammés au moyen du thermostat. L'eau de dérivation vient canalisée et rassemblée dans un bac chauffé, placé arrière le meuble, pour permettre l'évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- **Plage de température:** réglable entre +2°C /+15°C
- **Voltage (V/ph/Hz):** 230 / 1 / 50
- **Prise:** Schuko (type F+E)
- **Dispositif de sécurité:** N. 2 fusibles cylindriques de 10A, à protection de l'appareil
- **Niveau de bruit (dB(A)):** ≤ 52
- **Capacité brute (lt):** 1295
- **Capacité nette (lt):** 1160
- **Dimensions (L x P x H cm):** 150 x 70 x 210
- **Poids net (Kg):** 230
- **Dimensions de l'emballage (L x P x H cm):** 158 x 98 x 224 (3,47 m³)
- **Poids brut (Kg):** 260



ACCESSOIRES DISPONIBLES

REFRIGERATEUR MEDICAL-PHARMACEUTIQUE

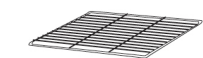


Clayette supplémentaire



Clayette supplémentaire en acier inox




Panier en fil

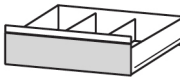

Tiroir en acier inox



Diviseur pour tiroir en plastique

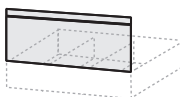

Avant levé pour tiroir



Kit de roulettes



Serrure de sécurité à clé



Enregistreur de température




Fonction datalogger avec porte USB




Senseur extra dans bouteille témoin pour alarme température



Prise électrique interne

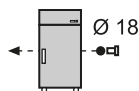


Passe-câble avec couverture
Ø 18 mm

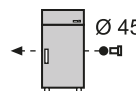

Passe-câble avec couverture
Ø 45 mm



Anti-déflagrant à l'intérieur

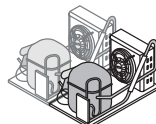


Groupe frigorifique de sécurité



Lumière de stérilisation à l'air



Thermostat de sécurité

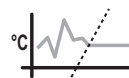

Ensemble uniformité et stabilité
température



Gaz écologique R290



Numéroteur téléphonique
GSM / GPRS



230V / 60 Hz Voltage différent



115V / 60 Hz Voltage différent



Emballage en caisse de bois



VERS. 06.19

* Les performances déclarées se peuvent vérifier quand la température ambiante est +35/40°C, avec une humidité de 70% et sans la présence de masse thermique (armoire vide).

* La Maison constructrice se réserve le droit d'opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu'elle considérera nécessaires ou utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits.